

OKOIA

Hydropulseur dentaire HYDR0150

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

OKoïa

HYDRO150

Smart Oral Irrigator
Hydropulseur dentaire
Compacte mondirrigator
Irrigador bucal inteligente
Irrigador Oral Inteligente



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER

POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements



- Lire les instructions.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Ce jet dentaire peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance.
- Ce jet dentaire peut être utilisé uniquement avec de l'eau froide ou chaude ou des solutions spécifiques comme mentionné dans les instructions du fabricant.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement

us à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si une fuite d'électrolyte se produit, éviter tout contact avec la peau. Isolez la batterie défectueuse dans un sac plastique hermétique et mettez-la au rebut en suivant les consignes de protection de l'environnement. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et prévenez votre médecin traitant ou votre ophtalmologue.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la façon d'enlever la batterie, référez-vous dans la section "Retrait des piles" en page FR-11.
-  Unité d'alimentation amovible
- Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation BI12TA-050060-Bdv.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- **MISE EN GARDE:** Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil. (Modèle de l'adaptateur : BI12TA-050060-Bdv, Fabriqué par Blue Iron Holdings Limited)
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.

Consignes de sécurité


- Les tout-petits, les enfants en bas âge, les personnes incapables de faire fonctionner cet appareil et les personnes ayant une faible sensibilité buccale ne doivent pas utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas ce produit à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau plus chaude que 40 °C.
- N'utilisez pas cet appareil tout en prenant votre bain.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un lieu où il risque de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- Ne tentez pas de récupérer cet appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Gardez le câble éloigné des surfaces chauffées.
- Gardez l'embout éloigné des jeunes enfants. L'embout est suffisamment petit pour être avalé et peut rester coincé dans la gorge.
- Certains types de bain de bouche peuvent endommager l'appareil en faisant craquer le boîtier ou le réservoir d'eau. Par conséquent, n'utilisez pas de bain de bouche dans le réservoir d'eau.
- Les personnes souffrant de douleurs aux dents ou aux gencives peuvent ne pas être en mesure d'utiliser cet appareil et doivent consulter leur dentiste.
- Ne pressez pas trop l'embout contre vos dents ou vos gencives.
- Ne modifiez jamais l'appareil. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.

Retrait des piles

Ce produit est fourni avec une batterie rechargeable en lithium 3,7V 1400mAh intégrée qui n'est pas accessible et ne peut pas être remplacée.


C'est pourquoi lorsque cet appareil devient hors d'usage, il doit être déposé dans un centre de recyclage.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez tout d'abord la batterie rechargeable de son logement en suivant les instructions ci-dessous.

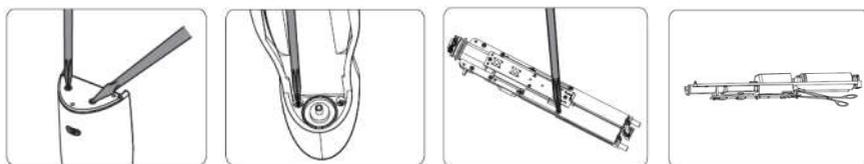

1. Retirez les 2 couvercles du fond du boîtier, puis enlevez la partie inférieure.
2. Faites glisser le réservoir d'eau hors du boîtier et dévissez les vis.
3. Sortez la partie interne de l'appareil, puis dévissez toutes les vis fixées sur la partie interne.
4. Coupez le câble et enlevez la batterie de la partie interne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

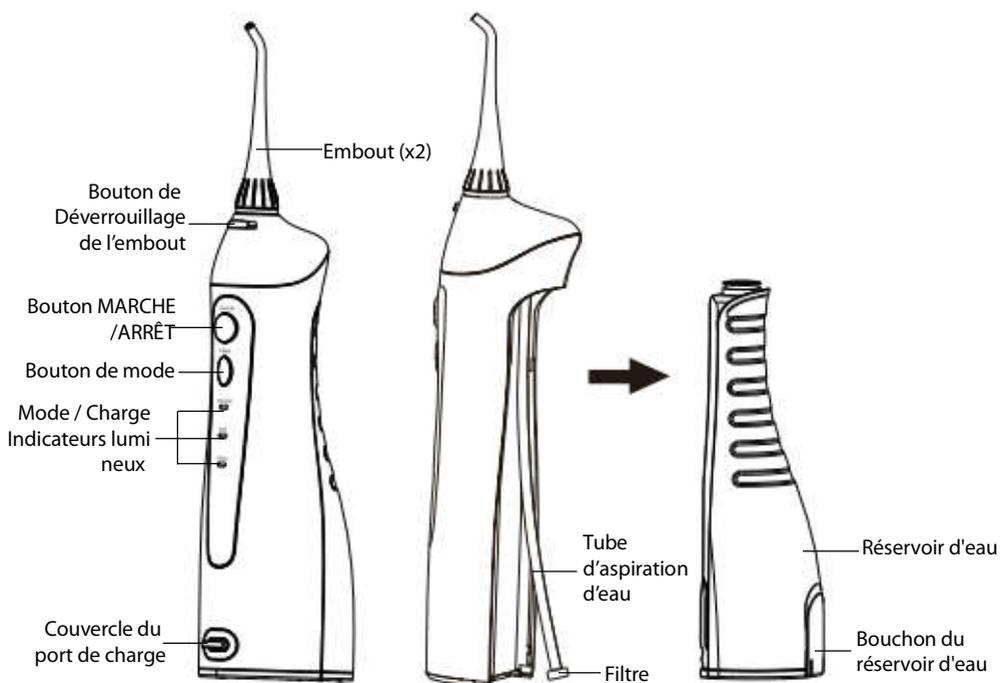

Remarque:

Il peut rester du liquide dans l'appareil principal (réservoir, tuyau d'aspiration d'eau, etc.), mais il s'agit d'eau distillée restante qui a été utilisée pour le test de performance (débit d'eau). Cela ne pose donc aucun problème sur la santé.

CHARGER L'APPAREIL

Il faut entre 4 et 5 h pour recharger complètement la batterie.
Une charge complète permet une durée d'utilisation entre 30 à 50 minutes.

1. Retirez le couvercle du port de charge.
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni dans le port de charge.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur.
4. L'indicateur lumineux de charge clignote en rouge pendant la charge puis s'éteindra une fois la batterie complètement rechargée.
5. Replacez le couvercle du port de charge sur l'appareil.



Remarque:

Si l'indicateur de charge clignote pendant ou après une utilisation, rechargez la batterie.


UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Attachez l'embout sur l'appareil.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau, remplissez le réservoir avec de l'eau dont la température ne doit pas dépasser 40 ° C, puis fermez le bouchon.

Ou,

retirez le réservoir d'eau de l'appareil, maintenez le réservoir en position verticale et remplissez-le avec de l'eau (température ne dépassant pas 40 ° C), puis replacez le réservoir dans l'appareil.

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode requis.
 - L'indicateur du mode correspondant s'allume.

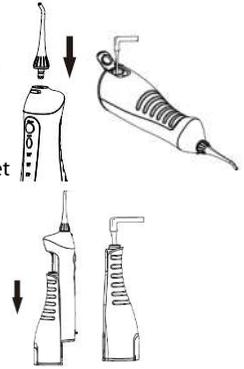

3 modes différents



NORMAL

pour un nettoyage normal



DOUX


pour masser et stimuler les gencives afin d'améliorer la circulation



PULSATIONS

pour nettoyer en profondeur entre les dents et sous la ligne des gencives


4. Tenez l'appareil en position verticale avec le bout de l'embout dirigé vers vos dents.
5. Gardez la bouche légèrement ouverte pour que l'eau puisse s'écouler.
6. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour démarrer l'appareil.

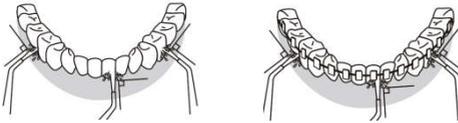

- Dirigez le jet d'eau à 90 degrés par rapport aux dents et aux gencives .
 - Dirigez le jet d'eau le long de la ligne des gencives avec le bout de l'embout à 90 degrés par rapport au tissu gingival.
 - Nettoyez soigneusement entre les dents et autour des bagues, des couronnes ou des bridges.
7. Une fois l'irrigation terminée, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil.


Remarque:

Si vous devez remplacer l'embout, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'embout pour retirer l'embout. Fixez ensuite un autre embout sur l'appareil.

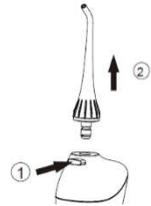

Après avoir utilisé l'appareil

1. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et jetez l'eau restante dans le réservoir.
2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer l'appareil et vidangez l'eau restante à l'intérieur de l'appareil.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil, et fermez le bouchon du réservoir d'eau.
4. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux.

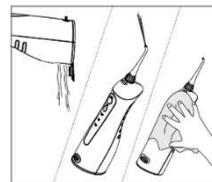

Pour éviter la croissance de bactéries, assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans l'appareil. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, essuyez-le et séchez-le soigneusement avant de le ranger.

Minuterie automatique de deux minutes



L'appareil s'éteint automatiquement après 2 minutes d'utilisation.

Un retardateur de deux minutes peut éviter qu'il continue à fonctionner une fois le nettoyage terminé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT :

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez uniquement de l'eau ou un détergent neutre pour nettoyer l'appareil. Ne le lavez pas à l'eau chaude de plus de 50 ° C. Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées et évitez le rayonnement solaire direct.

Unité principale

Nettoyez l'unité principale avec un chiffon humide.

N'immergez pas l'appareil dans de l'eau.

Essuyez l'appareil avec un chiffon doux.

Bouchon du réservoir d'eau

Essuyez les saletés avec un chiffon.

Réservoir

Lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux.

Videz le réservoir lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue

Embout

Lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux.

Tube d'aspiration d'eau

Lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux.

Ne pliez pas, ne tirez pas et ne tordez pas le tube d'aspiration d'eau.

période.

SPÉCIFICATIONS

Entrée de l'adaptateur : 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A

Sortie : 5V= 600mA

Entrée nominale de l'hydropulseur dentaire : 5V= 600mA

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

EU Declaration of Conformity

N°86201909917

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description -

SMART ORAL IRRIGATOR

Description du produit:

Productbeschrijving:

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Brand - Marque /Merk /Marca:

OKOIA

Model number - Référence commerciale:

HYDRO150

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

| Reference number | Title |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU | EMC Directive (EMC) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU | Low Voltage Directive (LVD) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2009/125/EC | Eco design requirements for energy-related products (ErP) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU | RoHS |

EMC:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

LVD:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010

EN 62233:2008

ErP:

(EC) No 278/2009

EN 50563:2013

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, 27 September, 2019

