

ORAL B

BROSSE A DENTS

VITALITY

STARTERPACK

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

Oral-B®

VITALITY™















powered by **BRAUN**



Charger Type 3757
Handle Type 3709



91971150

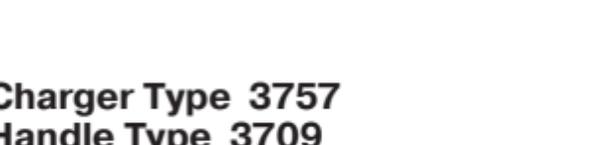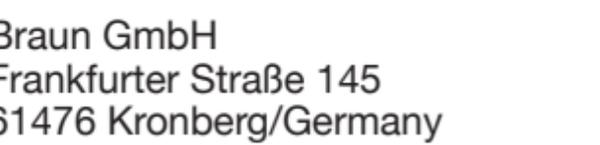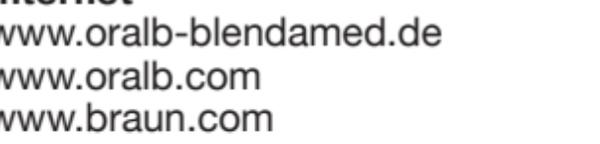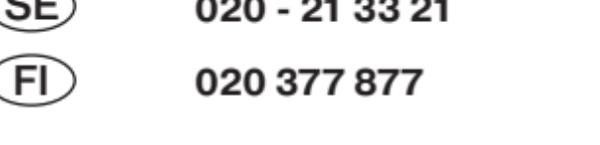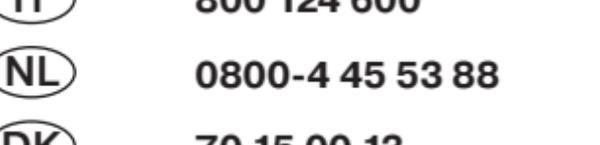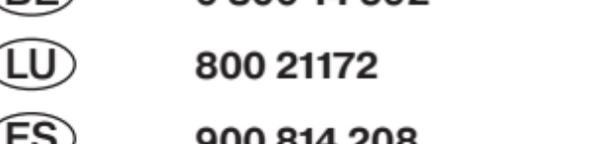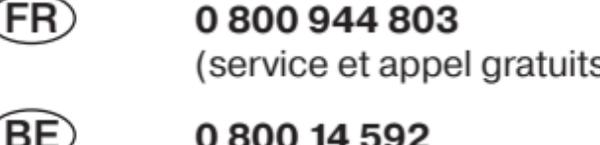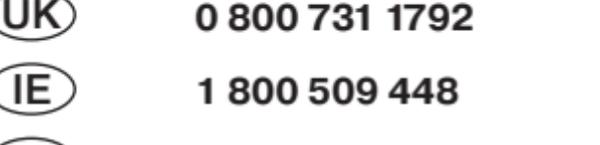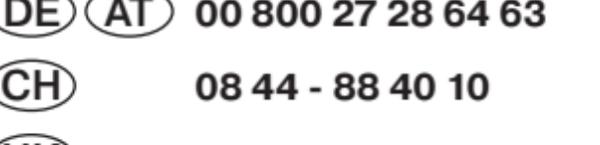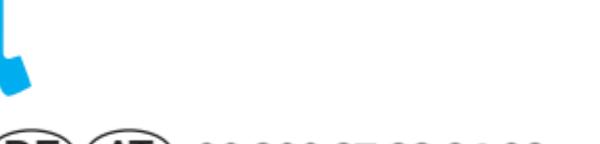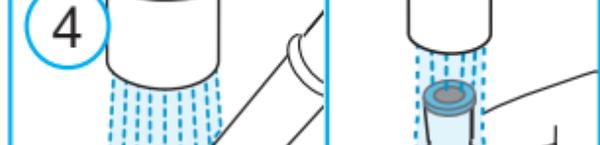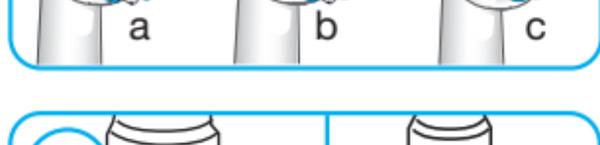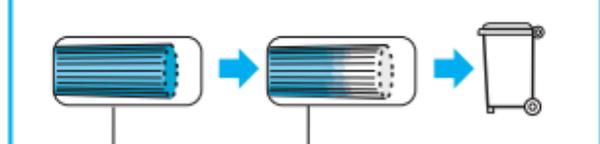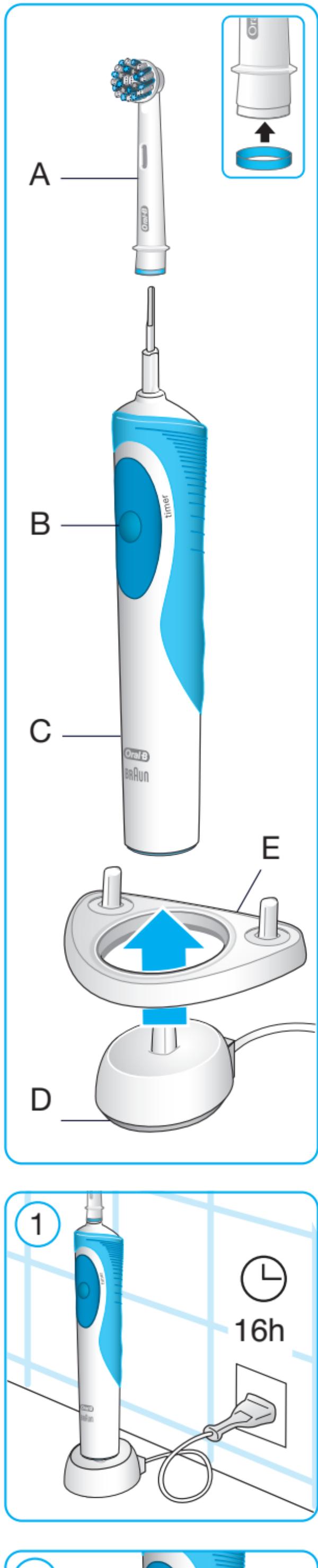

- DE** **AT** 00 800 27 28 64 63
- CH** 08 44 - 88 40 10
- UK** 0 800 731 1792
- IE** 1 800 509 448
- FR** 0 800 944 803
(service et appel gratuits)
- BE** 0 800 14 592
- LU** 800 21172
- ES** 900 814 208
- PT** 808 20 00 33
- IT** 800 124 600
- NL** 0800-4 45 53 88
- DK** 70 15 00 13
- NO** 22 63 00 93
- SE** 020 - 21 33 21
- FI** 020 377 877

Internet
www.oralb-blendamed.de
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com
www.az-oralb.it

Braun GmbH
 Frankfurter Straße 145
 61476 Kronberg/Germany

Charger Type 3757
Handle Type 3709

Français

Bienvenue chez Oral-B ! Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

IMPORTANT

- Vérifiez régulièrement que l'appareil dans sa totalité/le cordon d'alimentation ne soit endommagé. Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne plus, il ne faut plus l'utiliser.

Si l'appareil/le cordon d'alimentation est endommagé, rapportez le chargeur dans un centre de service agréé Oral-B. Ne cherchez pas à réparer ni à modifier le produit.

Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Les brosses à dents peuvent être utilisées par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil.

ATTENTION

- Evitez tout contact du chargeur avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne posez pas et ne rangez pas le chargeur dans un endroit d'où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne ramassez jamais le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez l'appareil immédiatement.

- Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables. Ne démontez pas le produit, sauf pour retirer du corps de brosse la batterie en fin de vie. Lors du retrait de la batterie du corps de brosse à dents, veillez à prendre de soin de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).

- Pour débrancher, tirez sur la prise elle-même et jamais sur le cordon. Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes buccodentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.

- Cette brosse à dents est un appareil de soin personnel. Elle n'est pas destinée à un usage par de multiples patients dans un cabinet dentaire ou dans un centre de soins dentaires.

Pour éviter que la brosette ne se détériore et que ses petites pièces ne présentent un risque d'étouffement ou n'endommagent les dents :

- Avant chaque utilisation, s'assurer que la brosette soit correctement enclenchée. Cesser l'utilisation de la brosse à dents, si la brosette ne s'enclenche plus correctement. Ne jamais utiliser l'appareil sans brosette.

- Si le manche de la brosse à dents tombe, la brosette devra être remplacée avant la prochaine utilisation, même si aucun dommage visible n'est constaté.

- Changez la brosette tous les 3 mois ou plus tôt si la brosette est abîmée.

- Nettoyer la brosette correctement après chaque utilisation (voir le paragraphe «Nettoyage»). Un nettoyage approprié assure une utilisation en toute sécurité et prolonge la durée de fonctionnement de la brosse à dents.

Description

A Brossette

B Bouton marche/arrêt

C Corps de brosse

D Chargeur

Accessoires (suivant le modèle):

E Porte-brossettes

Note : le contenu est susceptible de varier en fonction du modèle.

Spécifications :

Pour les spécifications liées au voltage, merci de vous référer aux indications situées sous le chargeur.

Niveau sonore : ≤ 65 dB (A)

Branchement et chargement

Le corps de brosse à dents est protégé contre les accidents électriques et conçu pour être utilisé dans la salle de bains.

- Branchez le chargeur (D) sur une prise électrique. Placez le corps de brosse (C) sur le chargeur. L'appareil se charge complètement en 16 heures pour une charge complète, ce qui permet jusqu'à 8 jours de brossage environ (2 brossages de 2 minutes chaque jour) (schéma 1).

- Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, le corps de la brosse à dents peut être remis sur le support de charge après chaque utilisation afin de maintenir son niveau de charge au maximum. Il n'y a aucun risque de surcharge.

- Pour que la batterie conserve sa capacité maximale, débranchez le chargeur et déchargez la batterie en utilisation normale au moins tous les 6 mois.

Utilisation de la brosse à dents

Technique de brossage

- Humectez la brosette et appliquez du dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosette sur vos dents avant de mettre

la brosse à dents en marche (Schéma 2).

- Lorsque que vous vous brossez les dents avec une des **brossettes Oral-B à oscillo-rotations**, déplacez doucement la brosette d'une dent à l'autre, en passant quelques secondes sur la surface de chaque dent.
- Quand vous utilisez la **brossette Oral-B «TriZone»**, placez la brosse à dents contre vos dents avec une petite inclinaison vers la gencive. Appliquez une légère pression et commencez à broser avec des mouvements de va-et-vient, comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle.
- Avec n'importe quelle brosette, commencez par broser les surfaces extérieures, puis intérieures et enfin les surfaces de mastication. Assurez vous de broser avec autant de soin les quatre quadrants de votre bouche. N'appuyez pas la brosette trop fort sur les dents; il vous suffit de laisser la brosse faire tout le travail (schéma 4). N'hésitez pas à consulter votre dentiste pour qu'il vous indique la technique de brossage vous correspondant le mieux.

Lors des premiers jours d'utilisation, il est possible que les gencives saignent légèrement. Si le saignement persiste après deux semaines, contactez votre dentiste.

Minuteur (suivant le modèle)

Un minuteur intégré mémorise le temps de brossage écoulé (suivant le modèle) (schéma 3).

Le «Minuteur 2 minutes» indique, par un bref signal que la durée de brossage de 2 minutes, recommandée par les dentistes, est atteinte.

Le «Minuteur Professionnel» vous signale par de brefs arrêts répétés toutes les 30 secondes, vous signalent qu'il faut broser de manière égale les quatre quadrants de votre bouche. Il indique par un long signal que vous avez atteint les 2 minutes de brossage recommandées par les dentistes.


Brossettes

La brosette Oral-B CrossAction




C'est notre brosette avec la technologie la plus avancée. Les poils inclinés permettent un brossage précis. Ils décollent et retirent la plaque dentaire.

La brosette Oral-B FlossAction

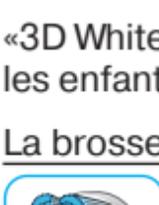

se caractérise par des poils micropulse qui pénètrent en profondeur entre les dents pour éliminer la plaque dentaire.


La brosette Oral-B 3D White

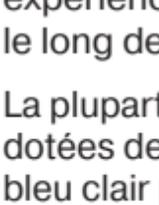

se caractérise par une partie centrale polissante pour des dents naturellement blanches.

La brosette Oral-B «3D White» ne doit pas être utilisée par les enfants de moins de 12 ans.

La brosette Oral-B Sensi Ultrathin

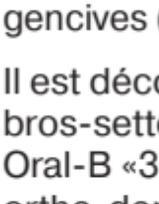

se caractérise par une combinaison de poils normaux pour nettoyer les surfaces des dents et des poils ultra-fins pour une expérience de brossage en douceur le long des gencives.

La plupart des brosettes Oral-B sont dotées de poils INDICATOR® de couleur bleu clair pour vous indiquer le moment où la brosette doit être changée. Dans le cadre d'une utilisation rigoureuse, deux fois par jour pendant deux minutes, les poils bleus se décolorent au bout d'environ 3 mois, indiquant le besoin de remplacer la brosette. Si les poils s'écartent avant leur décoloration, il se peut que vous exerciez une pression trop forte sur vos dents et vos gencives (schéma 4).

Il est déconseillé d'utiliser les brosettes Oral-B «FlossAction» et Oral-B «3D White» avec des appareils ortho-dontiques. Nous recommandons plutôt la brosette Oral-B «Orthodontic» (dans le kit Oral-B Ortho Care essentials), qui est spécifiquement conçue pour l'hygiène des dents appareillées.

Recommandations d'entretien


Après le brossage, rincez la brosette à l'eau courante en laissant la brosse à dents en marche. Arrêtez la brosse, retirez la brosette du corps de brosse. Nettoyez les deux éléments séparément, essuyez-les avant de les réassembler. De temps en temps, nettoyez le chargeur avec un chiffon humide; ne placez jamais le chargeur dans l'eau.

La base de rangement pour brosettes (E) passe au lave-vaisselle (schéma 5).

Sujet à modification sans préavis.

Respect de l'environnement

Cet appareil contient des batteries rechargeables et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, une fois l'appareil en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Veuillez le déposer pour le recycler dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition dans votre localité.

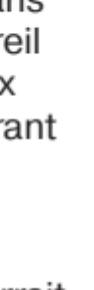

■

Garantie

Nous proposons une garantie limitée de 2 ans sur le produit, à compter de la date de l'achat. Pendant la période de garantie, nous résoudrons, sans frais, toute défaillance de l'appareil résultant de défauts de matériaux ou de fabrication, soit en le réparant ou en remplaçant l'intégralité de l'appareil, à notre discrétion.

Selon la disponibilité, le remplacement d'un appareil pourrait se faire avec un modèle de couleur différente ou un produit équivalent. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est fourni par Braun ou ses revendeurs agréés. Cette garantie ne couvre pas : les dommages dus à une mauvaise utilisation, l'usure normale, surtout en ce qui concerne les brosettes, ainsi que tout défaut ayant un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie est nulle si des personnes non autorisées effectuent des réparations et si des pièces Braun authentiques ne sont pas utilisées.

Pour obtenir le service pendant la période de garantie, amenez ou envoyez l'appareil avec votre ticket de caisse à un centre de service Oral-B Braun agréé.

Garantie et les brosettes de remplacement

La garantie Oral-B ne sera pas appliquée si les dommages du corps de brosse à dents électrique rechargeable se trouvent être attribués à l'utilisation de brosettes autres que Oral-B.

- Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brosettes autres que Oral-B.
- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brosettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brosettes qui ne sont pas de marque Oral-B, tel que annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut pas assurer le bon montage de brosettes autres que Oral-B.
- Oral-B ne peut pas prédire l'effet à long terme de l'utilisation de

brossettes autres que Oral-B sur l'usure du corps de brosse.

Toutes les brosettes Oral-B portent le logo d'Oral-B et répondent aux standards de haute qualité Oral-B. Oral-B ne vend pas de brosettes ou de pièce détachée sous le nom d'une autre marque.

Satisfait ou remboursé : le défi 30 jours

Essayez votre appareil Oral-B pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Si vous n'en êtes pas satisfait, nous vous rembourserons intégralement. Détails sur www.oralb.com ou appelez le :

FR : 0800 944 803 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour des achats en Belgique
Détails sur www.oralb.be

Pour plus d'informations, contactez notre service du consommateur:

BE : 0800 14592

LU : 800 21172